

iM70

Moniteur de patient



iM70

Moniteur de patient



12.1"

13 formes d'onde au maximum




Sans ventilateur Mode Nuit



Tonalité Enregistreur thermique



Menu raccourci Imprimante Ethernet

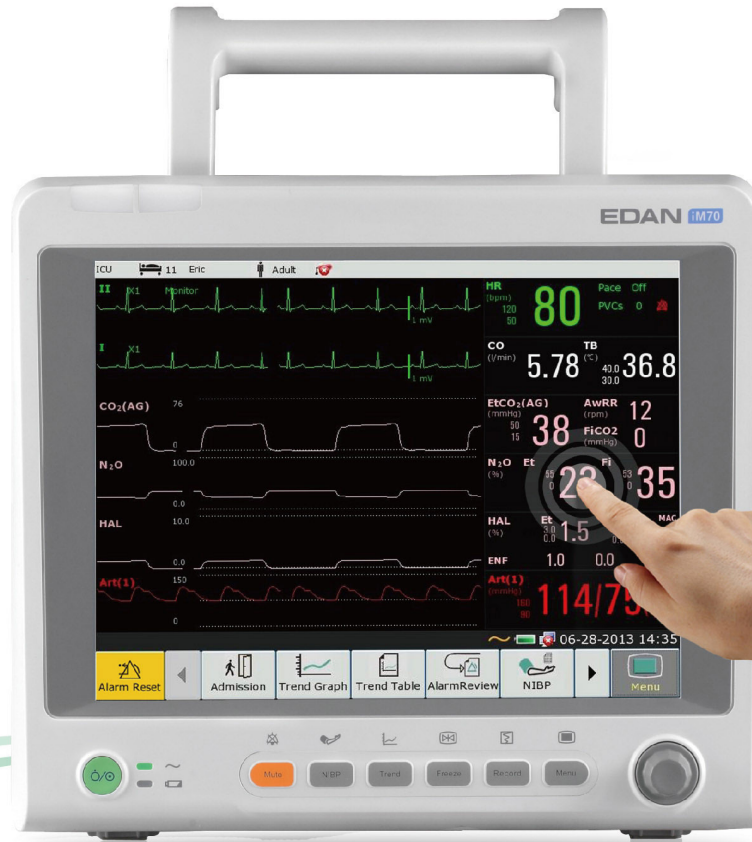

Paramètres standard

- ECG à 3/5 dérivations, FC, RESP, SpO₂ EDAN, PNI EDAN, PR, 2-TEMP

Paramètres optionnels

- ECG à 12 dérivations, 2-PI (avec prise en charge ICP), C.O., G2 CO₂ EDAN (flux secondaire), CO₂ Respirationics (flux principal et secondaire), gaz d'anesthésie/O₂ MASIMO, SpO₂ Nellcor OxiMax™, PNI SunTech®



➤ Algorithmes fiables

- Algorithme ECG iSPAETM optimisé pour la détection des arythmies, la détection des stimulateurs cardiaques et la mesure de FC
- Algorithme de diagnostic SEMIP® à 12 dérivations avec 208 types de résultats d'analyse
- Algorithme SpO₂ iMATM avec résistance exceptionnelle au mouvement et performance en faible perfusion
- Algorithme PNI iCUFSTM optimisé pour les patients cardiaques, les patients hypertendus et les nouveau-nés

➤ Plusieurs modes d'affichage



Affichage standard



Grande police



Affichage vital



Affichage tendance



OxyCRG



Vue du lit

➤ Dioxyde de carbone de fin d'expiration pour les patients intubés ou non intubés




G2 CO₂ EDAN (flux secondaire)

- Piège à eau de qualité supérieure pour un contrôle précis
- Algorithme iCARBTM avec technologie intelligente d'identification d'onde pseudo CO₂
- Plusieurs accessoires d'échantillonnage en option pour les patients adultes, les enfants et les nouveau-nés

CO₂ Respirationics (flux principal/secondaire)

- Conception de module Plug & Play
- Tube de déshumidification au lieu d'un piège à eau
- Faible taux d'échantillonnage de 50 ml/min convenant à tous les types de patients

➤ Gaz d'anesthésie/O₂ MASIMO (flux principal/secondaire)

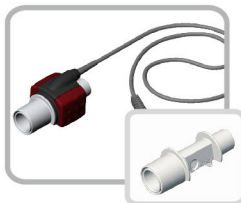

- Module Plug & Play unique pour la surveillance des gaz anesthésiques courants
- La conception de la ligne d'échantillonnage sans humidité convient à toutes les utilisations cliniques
- Faible débit stable de 50 ml/min pour tous les types des patients



Mémoire non volatile intégrée :

Un seul enregistrement de données patient contient :

1200

Examen des mesures PNI

120 h


Examen de tendance

200

Examen des alarmes

48 h

Phase de divulgation complète

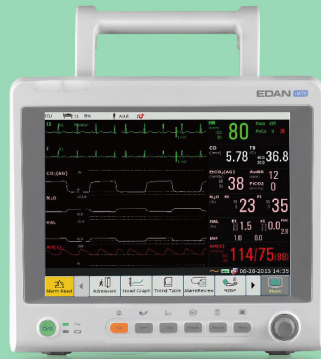

iM70

Moniteur de patient

À propos d'Edan

Edan est une entreprise de soins de santé qui se consacre à l'amélioration de la vie humaine dans le monde entier en fournissant des produits et des services médicaux de grande qualité, innovants et à forte valeur ajoutée. Depuis plus de 20 ans, Edan est le leader d'une gamme complète de solutions médicales destinées à un large éventail de pratiques de soins de santé, notamment :

- ECG de diagnostic
- Imagerie ultrasonique
- Diagnostics *in vitro*
- Surveillance patient
- Analyse hors laboratoire
- Vétérinaire
- Obstétrique/Gynécologie

Les professionnels de la santé du monde entier comptent sur les technologies médicales révolutionnaires et le soutien à la clientèle exceptionnel d'Edan.

 **Solic Medical**
Ph: 416-740-8885
info@solicmedical.com




EDAN

A world of potential